

How To Use?




www.blingboobs.com
고객센터 : 070-8822-8157

블링붐스 나세르 가슴마사지기

블링붐스 가슴마사지기는 음압(VACUUM)과 저주파(TENS)마사지를 사용하여 가슴을 건강하고 아름답게 관리하는 가슴 마사지기입니다.

주요 기능

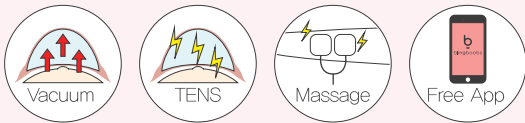


1. 음압과 저주파를 이용해 가슴을 마사지하는 기기입니다.
2. 저주파 패드를 이용해 가슴 외 부위도 마사지가 가능합니다.
3. 전용 앱을 활용하여 제품 컨트롤 및 가슴 관리가 가능합니다.

제품 사용 권장사항


- 사용 초기에는 몸이 기기에 적응할 수 있도록 낮은 단계부터 서서히 시간과 강도를 늘려 사용하시기 바랍니다.
- 저주파(TENS)기능은 1회 20분 이내, 최대 1시간 이내로 사용하시기 바랍니다.
- 압력(VACUUM)기능은 횟수나 시간에 관계 없이 사용가능합니다.

제품 착용 및 관리 방법

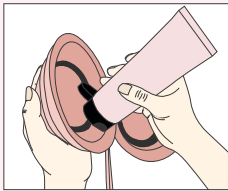

Step. 1


동 안쪽 검정색 도전성 패드 부분에 젤을 골고루 발라주세요.

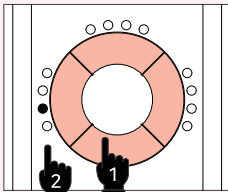

Step. 2


전원(POWER)버튼을 누른 후 음압버튼(VACUUM)을 세 번 눌러 압력을 최대로 높여 주세요.

·정상 흡착 후 음압을 1단계로 낮춰 사용하세요.

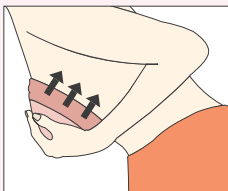

Step. 3

제품을 두손으로 잡고 허리를 숙여 가슴에 부착시킨 후 상체를 서서히 일으켜 제품이 가슴에 고정 될 수 있도록 꼭 눌러주세요.

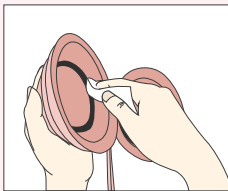


Step. 4

제품 사용을 마친 후 물티슈를 이용하여 제품에 묻은 젤을 깨끗이 닦은 후 물기를 말려 보관해주세요.

주의사항

사용시 주의사항

- 피부질환 및 상처가 있는 부위에 사용을 금합니다.
- 피부가 얇거나 예민하시다면 동 외곽 부분에도 젤을 듬뿍 발라 사용하시기 바랍니다.
- 임신중인 분, 유방 질환자, 가슴 보형물 삽입 수술을 하신 분은 전문의와 상담 후에 제품을 사용하시기 바랍니다.
- 제품 사용 시 심한 불편함을 느끼거나 고통스러움, 붓기, 피부 붉어짐, 가려움증, 피부 트러블 등이 발생할경우 사용을 중단해 주시기 바랍니다.
- 블링붐스 전용 젤 이외에 크림, 오일 사용을 금합니다.
- 실리콘이 변질되어 제품이 정상적으로 작동되지 않을 수 있습니다.

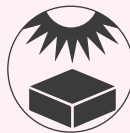

취급 및 보관 주의사항

- 제품을 떨어뜨리거나 충격을 가하지 마세요.
- 직사광선 및 먼지 습기가 많은 곳에 보관하지 마세요.
- 화학제품이나 세척제등은 사용하지 마시고 물티슈로 세척해 주세요.
- 저주파 패드 사용 시 느슨하게 부착하면 사용 중 띠꺼지는 현상이 발생할 수 있습니다.
- 부착이 원활하지 않거나 띠꺼지는 현상이 심해지면 패드를 교체하여 사용하세요.
- 동봉된 마이크로5핀 케이블을 이용하여 컴퓨터, 핸드폰 충전 어댑터 등으로 충전하세요.

블링붐스 사용법

전원버튼 (POWER)

한번 누르면 제품이 작동되고
한번 더 누르면 약 8초후 전원
이 꺼집니다.

음압버튼 (VACUUM)

가슴을 당겨주는 압력 버튼은
한 번 누르면 약
두 번 누르면 중
세 번 누르면 강
네 번 누르면 약~강 반복으로
작동합니다.

저주파 버튼 (TENS)

마사지 기능의 저주파 버튼은
한번 누르면 두드림
두번 누르면 주무름
세번 누르면 마사지
네번 누르면 각 기능 순환으로
작동합니다.

저주파 강도 조절 버튼 (+/-)

저주파 기능 사용 시 각 모드별로
세기조절이 가능합니다.강약조절은
화살표로 조절하며, 총 16단계의
저주파세기조절이 가능한버튼으로,
저주파(TENS)기능 사용 시에만
작동합니다.

자주 묻는 질문

1. 등과 등 사이 T자 호스가 빠졌어요.

T자 호스는 원래 탈부착이 가능한 부품입니다. 빠졌을 경우 다시 끼워서 사용해도 문제없으며, 지속적으로 너무 잘 빠질 경우에는 고객센터에 T자호스를 요청하시기 바랍니다.

2. 제품 사용 시 큰 소리가 나요.

제품 사용 시 발생하는 소리는 음압 기능 사용시에만 작동되는 음압모터의 소리입니다. 이는 설정하신 음압단계에 다르면 센서가 이를 감지하여 모터가 정지하고, 소리도 안나게 됩니다. 모터가 공기를 빨아들일 때만 발생하는 소리이므로,기기이상인 아니오니 안심하고 사용하시기바랍니다.

3. 음압 작동 시 소리가 안멈추고 계속 나요

등 내부에 압력이 형성되지 않을 시 모터가 계속 작동될 수 있습니다. 평평한 바닥에 제품을 얹어놓고 음압을 작동시켰을 때 모터가 멈추는지를 확인하신 후 고객센터로 문의주시기바랍니다.



4. 저주파가 한쪽만 약한 것 같아요

마사지기의 저주파는 한쪽이 +극, 한쪽이 -극으로 양쪽의 도전성 패드가 모두 피부에 닿았을 때만 작동됩니다. 이 때문에 어느 한쪽에만 전류가 몰리는 경우는 없습니다. 확인 방법은 양손 엄지에 젤을 소량 바르시고 한손은 왼쪽, 다른 한손은 오른쪽 도전성 패드를 잡아 확인하시기 바랍니다.

5. 등과 실리콘 보호막을 분리해서 세척 가능한가요?

등과 실리콘보호막이 일부 분리는 가능하나, 완전히 분해하여 세척은 불가능합니다. 완전히 분해할 경우 저주파 회선의 훼손으로 인해 제품이 정상작동이 되지 않을 수 있으니, 등과 실리콘 보호막의 분리세척은 지양해주시기 바랍니다.

제품 스펙

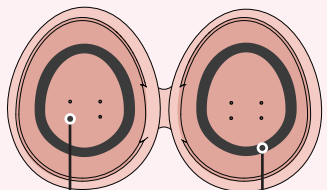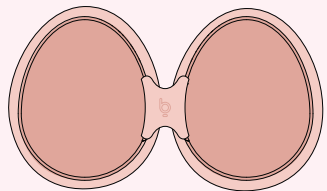

이중 실리콘 보호막

도전성 패드

제품명	블링붐스 가슴 마사지기
모델명	Bling-B
제조일자	2019년 1월
제조업자	(주)모디웍스
제조국	대한민국
적합성평가 인증번호	R-C-Bbd-Bling-B
취급 시 주의사항	물에 오래 노출되지 하지마십시오
제조사 및 A/S문의	070-8822-8157

